

Gebruik Farmapress 8

1. HET TOESTEL

7.2 Led bedieningspaneel




Behandeltijd:

Een sessie neemt doorgaans 60 minuten tijd, opgedeeld in 45' loswerken en 15' afvoeren.

De tijd stel je in door op de toets 'Time' te drukken

Programma:

Overzicht programma's, instelling via de toets 'Mode'

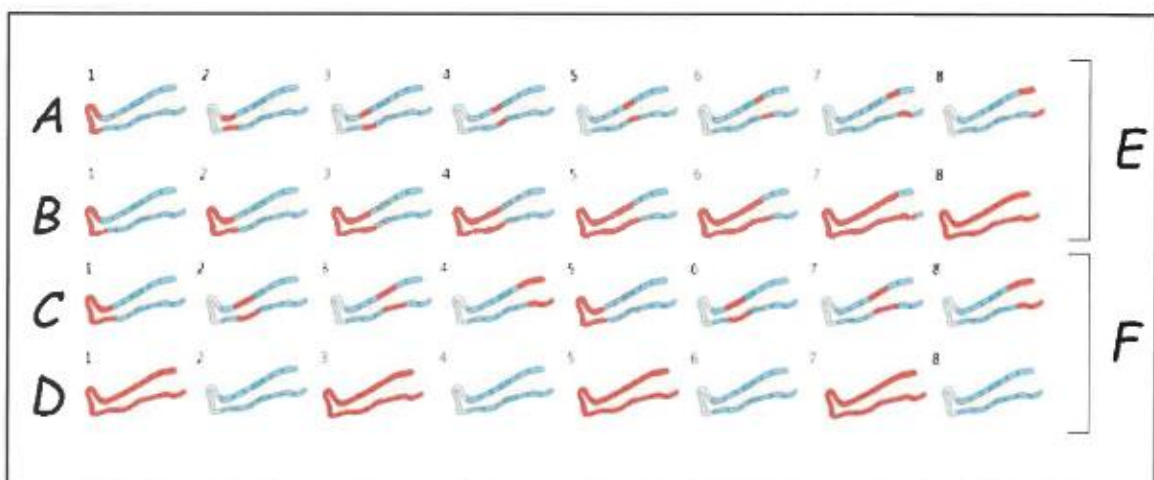

Welk programma te gebruiken?

Voor loswerken: programma A of C

Voor afvoeren: B of D, doch B heeft de voorkeur voor een goede afvoer omdat de verschillende kamers één voor één achter elkaar worden opgeblazen.

Je kan ook programma E nemen; daar heb je loswerken en meteen aansluitend afvoeren.

Nota: de gebruiker neemt best het programma waar ie zich het best bij voelt en het beste resultaat geeft.

Druk

Instellen gebeurt door de toetsen '+' en '-'


De druk mag nooit zodanig hoog zijn dat er een pijnsensatie is!

Voor loswerken wordt de druk doorgaans ingesteld van 30 – 50 mmHG. Het is mogelijk dat mensen zeer huidgevoelig zijn en weinig druk kunnen verdragen. Gelieve dan de druk laag in te stellen.

Voor het afvoeren is een druk van 50 – 80 mmHG aangewezen (advies vaatchirurg)

Compartimenten (kamers)

Van 1 tot 8

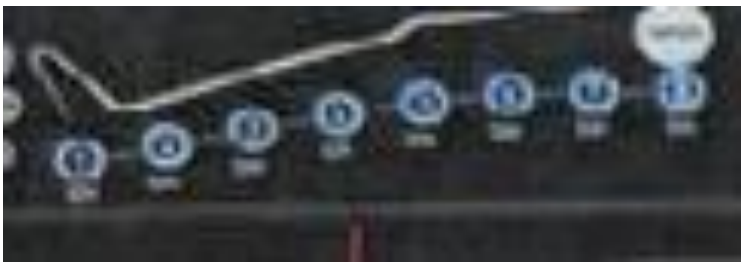

Het programma geeft aan welke kamer wordt opgeblazen, deze zal pinken.

Er kunnen ook kamers worden uitgeschakeld.

De nrs van de kamers lichten op wanneer het toestel wordt ingeschakeld. U kunt deze uitschakelen door kort op het betreffende nummer te drukken. Deze zal dan niet worden opgeblazen. Dat is niet enkel handig als je een kwetsuur hebt, doch ook als de beenstukken te lang zijn, kunnen de bovenste kamers worden uitgeschakeld.

Aan/ uit

Om het toestel aan te of uit te zetten

Start / Pauze

Om te starten en tussentijds -indien gewenst – te pauzeren.

2. TOEBEHOREN



Het aansluiten van de accessoires (zie handleiding blz 11). Kabels steeds van onder beginnen aan te sluiten (kortste kabel van de set).

Bij elk van de 4 toebehoren is er een kabelset voorzien. Eenmaal aangesloten verdient het aanbeveling dit zo te houden. De aansluitingspunten van de kabels met de toebehoren dienen voorzichtig te worden aangepakt bij het terug losmaken. Scheurt de ingang los van de betreffende kamer, is dit onherstelbaar en niet gedekt door garantie.

B. Steek de connector van de accessoirekabel in de luchtuitleat van het apparaat

LET OP: maak verbinding door de onderdelen te matchen die zijn gemarkeerd met een kleine driehoek



LET OP: om de twee benen tegelijkertijd te gebruiken, sluit u de twee kabels aan die overeenkomen met de splitterkabel en sluit u deze laatste aan op de luchtuitleat van het apparaat.